

IMPRIMO® LC Impression

1. Finalidade prevista / Indicação

Resina polimerizável de cura por luz destinada a utilização em conjunto com dispositivos de cura por luz extraorais. Indicado para a produção de moldes dentários.

2. Contraindicações

O **IMPRIMO® LC Impression** é contraindicado ...

1. ... em caso de alergia conhecida do paciente a um dos ingredientes.
2. ... em caso de contacto intraoral direto com material não curado ou parcialmente não curado.
3. ... para qualquer utilização que não conste da Indicação (ver acima).

3. Grupo-alvo de pacientes

Pessoas que estejam a ser sujeitas a tratamentos dentários.

4. Utilizadores previstos

Médicos dentistas, técnicos dentários

5. Requisitos

Informações sobre o software disponíveis em:

exocad GmbH · Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany

Hardware (3D Printing) - Informações disponíveis em:

ASIGA · 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Hardware (Post Curing) - Informações disponíveis em:

NK Optik GmbH (otoflash G171) · Isarstr. 2, D-82065 Baierbrunn, Germany

Informações adicionais em www.scheu-dental.com.

6. Material

IMPRIMO® LC Impression é composto por resinas metacrílicas funcionais, iniciadores, corantes e estabilizadores.

7. Requisitos geométricos

Espessura mínima da parede: 1,5 mm

8. Parâmetros do material

Profundidade da radiação controlável pelo tempo de exposição

50 µm

100 µm

9. Processo de fabrico (Fig. 1-10)

1. Prepare os dados (Preparação CAD e da construção).
2. Selecione um parâmetro de processo (Build-Style etc.).
3. Transfira os dados preparados para a impressora 3D.
4. Preparar a impressão 3D - agitar o frasco.
5. Encha o depósito de resina da impressora 3D.
6. Construa as peças.
7. Limpar as peças (com IPA ≥ 97 % ou produto de limpeza de qualidade equivalente) durante aprox. 4 minutos em banho de ultrassons ou aparelho de qualidade semelhante - pré-limpeza recomendada.
8. Secar as peças até deixarem de existir resíduos de IPA ou de produto de limpeza de qualidade equivalente.
9. Pós-cura (2 x 3000 flashes - Otofash G171):
Recomenda-se a utilização de atmosfera inerte.
10. Finalizar as peças.

10. Finalização

Polimento

11. Indicação


Siga as instruções do fabricante do software relativamente à configuração de parâmetros e recomendações de construção. Siga as instruções do fabricante do hardware relativamente à configuração de parâmetros e recomendações de impressão e pós-cura. Para evitar efeitos adversos na qualidade do material, não sujeite o material líquido a radiações em qualquer circunstância. Os desvios em relação aos processos de fabrico ou condições de armazenamento descritos podem causar diferenças nas características mecânicas e visuais do material. Durante o processamento, utilize equipamento de protecção individual. De acordo com o regulamento da UE sobre dispositivos médicos, os utilizadores/pacientes são obrigados a comunicar eventos graves com um dispositivo médico ao fabricante e à autoridade responsável no país em que ocorreram. **Atenção:** O número de lote e a data de validade são indicados em cada embalagem do material. Em caso de reclamações, indique sempre o número de lote do produto. Não utilize o produto após a data de validade. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Lavar bem as mãos após a utilização. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar com sabonete e água abundantes. **EM CASO DE INALAÇÃO:** retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo/ contentor em conformidade com os regulamentos oficiais.

12. Indicações de perigo

Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave.



UMDNS 16-697

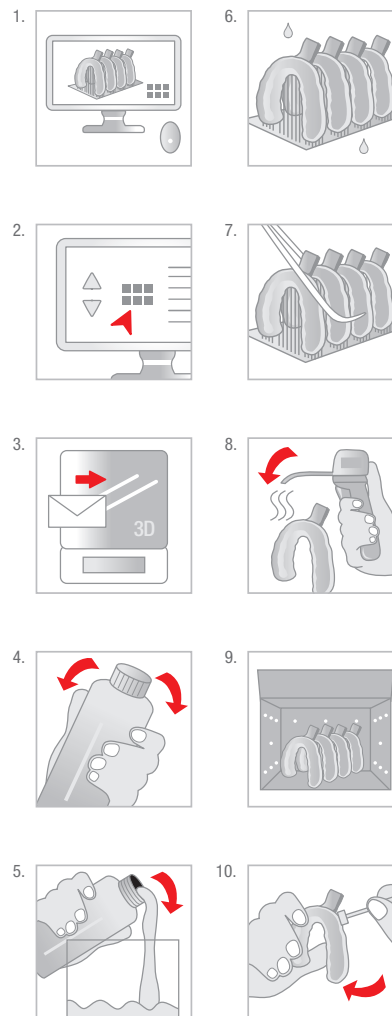

Características físicas */
Fyzikálne vlastnosti */
Fizikalne lastnosti */
Fizikalna svojstva */
Fyzikální vlastnosti *:

IMPRIMO® LC Impression

■ Endurecedor Shore D/
Tvrdost podľa
stupnice Shore D/
Trdota po Shoru D/
Shore-čvrstoća D/
Tvrdost podle
stupnice Shore D
(ISO 48-4)**:
80 ± 5

■ Tensão de flexão/
Napätie v ohybe/
Upogibna napetost/
Napon pri savijanju/
Napětí v ohybu
MPa (ISO 178)**:
≥ 80

■ Módulo de flexão/
Modul pružnosti v ohybe/
Upogljivostni modul/
Modul savijanja/
Modul pružnosti v ohybu
MPa (ISO 178)**:
≥ 1600

■ Alongamento de flexão
(em caso de quebra)/
Predĺženie v ohybe
(pri prasknutí)/
Upogibno raztezanje
(ob zlomu)/
Istezanje pri savijanju
(pri lomu)/
Prodloužení v ohybu
(při prasknutí)
(ISO 178)**:
Ca. 9 %

■ Resistência ao impacto
(IZOD sem entalhe)/
Pevnosť v náraze
(IZOD nevrúbkované)/
Odpornost na udarce
(IZOD nezarezano)/
Čvrstoća na udarce
(IZOD bez ureza)/
Pevnost v rázu
(IZOD nevrubkované)
kJ/m² (ISO 180/U)**:
≥ 20

Informações para encomenda/
Informácie o objednaní/
Informacije za naročanje/
Informacije za narudžbe/
Objednaci informace:

IMPRIMO® LC Impression

1 kg:
λ ≤ 405 nm

orange/
orange/
orange/
naranja/
arancione
REF: 6506

* Estes dados provêm de medições de uma amostra representativa, que foi determinada no âmbito da nossa garantia de qualidade. / Tieto údaje pochádzajú z meraní reprezentatívnej vzorky, ktoré boli zistené v rámci nášho zabezpečenia kvality. / Ti podatki izhajajo iz meritev reprezentativnega vzorca, ki so bili določeni kot del našega zagotavljanja kakovosti. / Ti podatki potječu iz mjerenja reprezentativnog uzorka koja su utvrđena kao dio našeg osiguranja kvalitete. / Tieto údaje jsou z měření reprezentativního vzorku, které bylo provedeno v rámci našeho zajišťování jakosti.
** De acordo com as especificações e requisitos internos da concepção / Podľa interných špecifikácií návrhu a požiadaviek. / Podľa internih špecifikacij namrhu a požiadavki.
*** em conformidade com... / v nadváznosti na... / v skladu z... / u skladu s... / v souladu s...
**** Não aplicável / Nepoužíva sa / Nije uporabno / Nije primjenjivo / Nepoužíva se



Este lado para cima.
Táto stránka je na vrchu.
Ta stran navzgor.
Ovo stranu prema gore.
Tuto stránku nahoru.



Limites de temperatura
Hranica teploty
Temperaturna meja
Temperaturna granica
Teplotni limit



Atenção
Pozor
Pozor
Pozor



Não utilizar se a embalagem se encontrar danificada.
Nepoužívať, ak je obal poškodený.
Ne uporabljajte paketa, če je poškodovan.
Ne rabite ako je pakiranje oštećeno.
Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.



Respeitar as instruções de utilização.
Postupujte podľa návodu na použitie.
Uporabljajte navodila za uporabo.
Uvaživajte upute za upotrebu.
Dodržujte návod k použití.



Manter afastado da luz solar.
Uchovávajte mimo dosahu slnečného žiarenia.
Ne izpostavljajte sončni svetlobi.
Čuvati podalje od sunčeve svetlosti.
Uchovávejte mimo dosah slunečního záření.

Rx only
QTY: 1EA



Produto médico
Zdravnišnično pomočilo
Medicinski izdelek
Medicinski proizvod
Zdravstveni prostredjek



Data de validade
Datum trvanlivosti
Rok trajanja
Rok trajanja
Datum trvanlivosti



Número de catálogo
Katalógové číslo
Kataložna številka
Katalóški broj
Katalógovoe číslo



Número de lote
Číslo šarže
Številka serije
Broj šarže
Číslo šarže



Data de fabric
Datum výroby
Datum izdelave
Datum proizvodnje
Datum výroby

Manufactured by:

pro3dure medical GmbH
Am Burgberg 13
D-58642 Iserlohn, Germany
Phone: +49 2374 920050-0

info@pro3dure.com
www.pro3dure.com



Made in Germany

Manufactured for & distributed by:

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn, Germany
Phone: +49 2374 9288-0
Fax: +49 2374 9288-90

service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com

1. Účel použitia/indikácia
Svetlom vytvrdzovaná polymerizovateľná živica určená na použitie v kombinácii s extraorálnymi jednotkami na vytvrdzovanie svetlom. Indikované na výrobu zubných odtlačkových lýžic.

- 2. Kontraindikácie**
IMPRIMO® LC Impression je kontraindikovaný ...
1. ... ak je známe, že pacient je alergický na niektorú zo zložiek.
 2. ... v prípade priameho intraorálneho kontaktu nevytvrdnutého alebo čiastočne nevytvrdnutého materiálu.
 3. ... pre všetky aplikácie, ktoré nie sú súčasťou indikácie (pozri vyššie).

3. Cieľová skupina pacientov
Osoby, ktoré sú ošetrenej v rámci stomatologického zákroku.

4. Zamýšľaný používateľ
Zubný lekár, zubný technik

5. Požiadavky
Softvér - informácie sú k dispozícii od:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany

Hardvér (3D tlač) - informácie sú k dispozícii od:
ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Hardvér (po vytvrdení) - informácie sú k dispozícii od:
NK Optik GmbH (otoflash G171) - Isarstr. 2, D-82065 Baierbrunn, Germany

Ďalšie informácie nájdete na www.scheu-dental.com.

6. Materiál
IMPRIMO® LC Impression sa skladá z funkčných metakrylových živíc, iniciátorov, farieb a stabilizátorov.

7. Geometrické špecifikácie
Minimálna hrúbka steny: 1,5 mm

8. Parametre materiálu
Hĺbka ožiarenia riadená časom expozície
50 µm
100 µm

1. Namen uporabe/indikacija
Umetna masa, ki se strdi na svetlobi in polimerizira ter je predvidena za uporabo v povezavi z extraoralnimi napravami za strjevanje na svetlobi. Indicirano za izdelavo zobnih odtisnih lýžic.

- 2. Kontraindikacije**
Izdelek **IMPRIMO® LC Impression** tray se kontraindicira ...
1. ... če je znano, da je pacient alergičen na eno izmed sestavin.
 2. ... pri neposrednem intraoralnem stiku z neutrimen ali delno neutrimenim materialom.
 3. ... pri vsaki uporabi, ki ni del indikacije (gl. zgoraj).

3. Ciljna skupina pacientov
Osebe, ki so obravnavane v okviru zobozdravniškega ukrepa.

4. Predviden uporabnik
Zobozdravnik (m/ž), zobni tehnik (m/ž)

5. Zahteve
Programska oprema - informacije na voljo od:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany

Strojna oprema (3D tiskanje) - informacije na voljo od:
ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Strojna oprema (postzdravljenj) - informacije na voljo od:
NK Optik GmbH (otoflash G171) - Isarstr. 2, D-82065 Baierbrunn, Germany

Dodatne informacije: www.scheu-dental.com.

6. Material
Izdelek **IMPRIMO® LC Impression** je sestavljen iz funkcionalnih metakrlnih smol, iniciatorjev, barvil in stabilizatorjev.

7. Geometrične smernice
Min. debelina stene: 1,5 mm

8. Materialni parametri
Globina sevanja vodilva s časom osvetlitve
50 µm
100 µm

9. Výrobný proces (obr. 1 - 10)

1. Priprava údajov (CAD a konštrukčná príprava).
2. Vyberte parametre procesu (štyl zostavenia atď.).
3. Preneste pripravené údaje do 3D tlačiarne.
4. Pripravte 3D tlač – pretrepte fľašu.
5. Naplňte živico do nádob 3D tlačiarne.
6. Zostavte komponenty.
7. Vyčistite komponenty (pomocou IPA ≥ 97 % alebo ekvivalentného čistiaceho prostriedku) počas približne 4 minút v ultrazvukovom kúpeľi alebo ekvivalentnom zariadení – odporúča sa predbežné vyčistenie.
8. Osušte komponenty tak, aby na nich nezostali zvyšky IPA alebo ekvivalentného čistiaceho prostriedku.
9. Následné vytvrdzovanie (2 x 3000 zábleskov - Otofash G171):
Odporúčaná inertná atmosféra.
10. Dokončite komponenty.

10. Dokončenie
Leštenie

11. Upozornenie
Dodržiavajte pokyny výroby softvéru týkajúce sa nastavenia parametrov a odporúčani pre návrh. Dodržiavajte pokyny výroby hardvéru týkajúce sa nastavenia parametrov/tlaku a odporúčani pre následné vytvrdzovanie. Ak chcete zabrániť škodlivým účinkom na kvalitu materiálu, nikdy nevystavujte tekutý materiál žiareniu. Odchýlky od opísaných výrobných procesov alebo podmienok skladovania môžu viesť k odchýlkam mechanických a optických vlastností materiálu. Počas spracovania používajte osobné ochranné prostriedky. Podľa nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach sú používatelia/pacienti povinní hlásiť závažné nehody týkajúce sa zdravotníckej pomôcky výrobcovi a príslušnému orgánu krajiny, v ktorej k nim došlo. **Pozor:** Číslo šarže a dátum minimálnej trvanlivosti sú uvedené na každom balení materiálu. V prípade reklamácie vždy uveďte číslo šarže výrobku. Nepoužívajte výrobok po dátume minimálnej trvanlivosti. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmy/pár/aerosolov. Po použití si dôkladne umyte ruky. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Je zakázané vymiešť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PÔ VDI/CHNÚT: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umočnite jej pohodine dýchat. PÔ ZASIAHNUTÍ OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhladajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážky: vyhladajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak sa podráždenie očí pretrváva: vyhladajte lekársku pomoc/starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte uzamknuté. Obsah/kontajner zlikvidujte v súlade s úradnými predpismi.

12. Výstražné upozornenia
Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

9. Postopek izdelave (sl. 1 - 10)

1. Pripravite podatke (CAD & priprava izdelave).
2. Izbra procesnih parametrov (Build-Style itd.).
3. Promos pripravjenih podatkov na 3D-tiskalnik.
4. Pripravite 3D-tiskalnik - pretrešite posodo.
5. Napolnite posodo za smolo 3D-tiskalnika.
6. Sestavite dele.
7. Čistite dele (z IPA ≥ 97 % ali enakovrednim čistilnim sredstvom) ca. 4 minút v ultrazvočni ko-peli ali drugi enakovredni napravi - priporočljivo predčiščenje.
8. Sušite dele, dokler na njih ni več ostankov IPA ali enakovrednega čistilnega sredstva.
9. Po utrjevanju (2 x 3000 bliskov - Otofash G171):
Priporočena je inertna atmosfera.
10. Dokončajte izdelavo delov.

10. Finaliziranje
Poliranje

11. Napotek
Sledite navodilom proizvajalca programske opreme glede nastavitve parametrov in konstrukcijskih priporočí. Sledite navodilom proizvajalca strojne opreme glede nastavitve parametrov in priporočí za tiskanje in naknadno utrjevanje. V izogib negatívnym účinkom na kvalovost materiálu, tekočiega materiálu nikoli ne izpostavljajte osvetľovaniu. Odstopanja od opísaných postupkov izdelave ali pogojev shranjovania lahko privedú do odstopanj mehanských in optických lastností materiálu. Bodite med obdelavo pozorni na osobno zaščitno opremo. Skladno z Úredbo o medicínských prípomôckach (EÚ) so uporabníci/pacienti dolžní javiť ťažké potoke v povezavi z medicínským prípomôckom proizvajalcau in prístojnínym organom v državi, v kateri je do njih prišlo. **Pozor:** Številka série in rok uporabnosti sta navedena na vsaki embalaži materiálu. Prosím, da v prímeru reklamácie vedno navedete številku série izdelka. Izdelka ne uporabljate po preteku roka uporabnosti. Ne vdiavati prahu/díma/plína/maglice/hlapov/razpršila. Po uporabi si temeljito umyte ruke. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnegá mesta. Nositi zaštitné rukavice/zaštitno obleko/zaštitu za oči/zaštitu za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veľikou mľa in vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osobu na svež zrak in jo pustiť v udobnom položíaji, ki oľašja dýhanie. PRI STIKU Z OČMI: prevídno izpirajte z vodo nekaj minút. Oštráňte kontaktné lečie, če jh imáte in če to ľahko stoníte brez ťažav. Nadáľujte z izpi-raním. Če nastopí draženie kože: pošíšite zdravnišku pomôč/osobro. Če nastopí draženie kože ali se pojaví izpušćai: pošíšite zdravnišku pomôč/osobro. Čo draženie očí ne premeťa: pošíšite zdravnišku pomôč/osobro. Sľečí kontaminirana obľačia in jh ograti pred ponovnou uporabo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprtí posodi. Hraniti zakľejenou. Vsebino/posodo odstráňte v skláu z úradnými predpisi.

12. Varnostní napotki
Povzroča draženie kože. Lahko povzroči alergijskí odziv kože. Povzroča hudo draženie očí.

1. Namienjena uporaba / Indikacije
Polimerizirajući plasićni materijal koji se stvrdnjava svjetlom, predviđen za upotrebu u kombi-naciji s ekstroralnim uređajima za svjetlosno polimerizaciju. Indicirano za proizvodnju dentalnih otisnih lýžica.

- 2. Kontraindikacije**
IMPRIMO® LC Impression je kontraindiciran ...
1. ... kada je poznato da je pacijent alergičan na neku sadržanu tvar.
 2. ... u slučaju izravnog intraoralnog kontakta s materijalom koji se nije ili jest samo djelomično stvrdnuo.
 3. ... za svaku primjenu koja nije dijelom indikacije (vidi gore).

3. Skupina pacijenata
Osobe koje se liječe u sklopu stomatološke mjere.

4. Predviđeni korisnik
Stomatolog/-inja, zubarski tehničar/-ka

5. Zahtjevi
Softver - informacije dostupne na:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany

Hardver (3D ispis) - informacije dostupne na:
ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Hardver (naknadno stvrdnjavanje) - informacije dostupne na:
NK Optik GmbH (otoflash G171) - Isarstr. 2, D-82065 Baierbrunn, Germany

Dodatne informacije na stranici: www.scheu-dental.com.

6. Materijal
IMPRIMO® LC Impression sastoji se od funkcijskih metakrlnih smola, inicijatora, bojila i stabilizatora.

7. Geometrijski predlošci
Minimalna debljina stijenke: 1,5 mm

8. Parametri materijala
Dubinom zračenja može se upravljati putem vremena ekspozicije svjetlu
50 µm
100 µm

1. Účel použiti/indikace
Polymerizovatelná pryskyřice vytvrzovaná světlem je určena k použití ve spojení s extraorálními jednotkami pro vytvrzování světlem. Indikováno pro výrobu zubních odtiskovacích lýžček.

- 2. Kontraindikace**
IMPRIMO® LC Impression je kontraindikovaný ...
1. ... pokud je známo, že pacient je alergický na některou ze složek.
 2. ... v případě přímého intraorálního kontaktu nevytvrděného nebo částečně nevytvrděného materiálu.
 3. ... pro každou aplikaci, která není součástí indikace (viz výše).

3. Cílová skupina pacientů
Osoby, které jsou ošetřovány v rámci stomatologického zákroku.

4. Zamýšlený uživatel
Zubní lékař, zubní technik

5. Požadavky
Software - informace jsou k dispozici od:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany

Hardwar (3D tisk) - informace jsou k dispozici od:
ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Hardwar (po vytvrzení) - informace jsou k dispozici od:
NK Optik GmbH (otoflash G171) - Isarstr. 2, D-82065 Baierbrunn, Germany

Dašľ údaje na www.scheu-dental.com.

6. Materiál
IMPRIMO® LC Impression se skládá funkčních metakrylových pryskyřic, Iniciátorů, barvů a stabilizátorů.

7. Geometrické špecifikace
Minimální tloušťka stěny: 1,5 mm

8. Parametry materiálu
Hĺbka záření řídění časem expozice
50 µm
100 µm

9. Postupak izrade (Sl. 1-10)

1. Pripremite podatke (CAD i priprema konstrukcije).
2. Odaberite parametre postupka (build-style itd.).
3. Prenesite pripremljene podatke na 3D pisać.
4. Priprema 3D pisaća - protrešite bocu.
5. Napunite spremnik za smolu 3D pisaća.
6. Izradite dijelove.
7. Očistite dijelove (s pomoću IPA ≥ 97% ili istovrijednim sredstvom za čišćenje) u trajanju od oko 4 minute u ultrazvućnoj kupelji ili istovrijednom uređaju: preporučuje se prethodno čišćenje.
8. Sušite dijelove sve dok ostanć IPA-e ili istovrijednog sredstva za čišćenje ne nestanu.
9. Nakon sušenja (2 x 3000 bljeskova - Otofash G171):
Preporučuje se inertna atmosfera.
10. Dovořite izradu dijelova.

10. Finaliziranje
Poliranje

11. Napomena
Slijedite upute proizvođaća softvera u vezi s postavkama parametara i preporukama za konstrukciju. Slijedite upute proizvođaća hardvera u vezi s postavkama parametara / preporukama za otkrivanje i naknadno stvrdnjavanje. Kako biste izbjegli štetne učinke na kvalitetu materijala, ni u kojem slučaju ne izlaćte tekući materijal zraćenju. Odstupanja od opisanog postupka izradbe ili uvjeta skladištenja mogu dovesti do odstupajć mehanićkih i optićkih svojstava materijala. Obratite pozornost na osobnu zaštitnu opremu tijekom obrade. Prema EU-ovoj Uredbi o medicínskím proizvodima, korisnici/pacijenti su dužni prijaviti ozbiljne događaje s medicínskím proiz-vodima proizvođaću i nadležnom tijelu u zemlji u kojoj su se oni dogodili. **Pozor:** Broj šarže i rok trajanja navedeni su na svakoj ambalaži materijala. U slučaju reklamacije, uvijek navedite broj šarže proizvoda. Ne upotrebljavajte proizvod nakon njegova isteka roka valjanosti. Izbjegavati udisanje prašine/díma/plína/magle/para/aerosola. Nakon upotrebe temeljito oprati ruke. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozraćevanem prostoru. Zagradena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUĆAJU DODIRA S KOŽOM: oprati veľkom kolićinom sapuna i vode. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U SLUĆAJU DODIRA S OĆIMA: oprano ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktné leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U slučaju nadražaja kože: zatražití savjet/pomôć lijećnika. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražití savjet/pomôć lijećnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražití savjet/pomôć lijećnika. Skinuti zagadenu odjeću i prije je prije po novne uporabe. Skladištiti na dobro prozraćevanom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti pod ključem. Odložití sadržaj/spremník u skláu sa službením propisima.

12. Napomene o opasnostima
Nadražuje kožu. Môže izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka.

9. Výrobní proces (obr. 1 - 10)

1. Příprava údajů (CAD a konstrukční příprava).
2. Vyberte parametry procesu (styl sestavení atď.).
3. Přeneste připravené údaje na 3D tiskárnu.
4. Připravte 3D tisk – protřepte láhev.
5. Naplňte pryskyřici do nádob 3D tiskárny.
6. Vytvořte komponenty.
7. Vyčistěte komponenty (pomocí IPA ≥ 97 % nebo ekvivalentního čistícího prostředku) po dobu 4 minut v ultrazvukové koupeli nebo rovnomocném přístroji – doporučuje se provést předbežné vyčištění.
8. Osušte komponenty tak, aby na nich nezůstaly zbytky IPA nebo ekvivalentního rovnomocného čistícího prostředku.
9. Dodatečně vytvrzení (2 x 3000 záblesků - Otofash G171):
Doporučená inertní atmosféra.
10. Dokončete komponenty.

10. Dokončení
Leštění

11. Upozornění
Dodržujte pokyny výrobce softwaru při nastavení parametrů a doporučení pro návrh. Dodržujte pokyny výrobce hardwaru při nastavení parametrů/tlaku a doporučení pro následné vytvrzování. Abyste zabránili škodlivým účinkům na kvalitu, za žádných okolností nevystavujte tekutý materiál záření. Odchylky od popsaných výrobních procesů nebo podmínek skladování mohou vést k odchýlkám mechanických a optických vlastností materiálu. Během zpracování používejte osobní ochranné prostředky. Podle nařízení EÚ o zdravotnických prostředcích jsou uživatelé/pacienti povinni hlásit závažné nehody týkající se zdravotnických prostředků výrobci a příslušnému orgánu země, ve které k nim došlo. **Pozor:** Číslo šarže a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na každém balení materiálu. V případě reklamacie vždy uveďte číslo šarže výrobku. Nepoužívejte výrobek po datu minimální trvanlivosti. Zamezte vdechování prachu/dymu/plynu/hmy/pár/aero-solů. Po použití si důkladně umyte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větráných pro-storách. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při STYKU S KÚŽÍ: Omyte veľkým množstvom vody a mydla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAHNUTÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetvářá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontami-novaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávajte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s úředními předpisy.

12. Výstražná upozornění
Dráždí kúži. Môže vyvolat alergickú kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.